



again

Épilation | Lésions vasculaires & pigmentaires
| Rajeunissement cutané non ablatif |
Varicosités des jambes | Pseudofolliculite
de la barbe (PFB) | Onychomycose

AGAIN révolutionne l'Esthétique et la Dermatologie.



DEKA
Innate Ability

La parole aux praticiens

“ Dans ma clinique, nous nous sommes engagés à fournir un excellent service médical qui dépasse les normes du secteur, avec pour principal objectif la satisfaction de nos patients. **La flexibilité d'AGAIN me permet de répondre aux besoins des patients et d'étendre ma pratique en même temps ! Je crois fermement que le fait de disposer de plus d'une longueur d'onde me permet d'élargir les indications de traitement** : les longueurs d'onde Alexandrite et Nd:YAG sont complémentaires pour obtenir des résultats rapides et sûrs avec tout type de couleur de peau, en particulier avec les peaux foncées. **De plus, les lésions pigmentaires superficielles peuvent être facilement traitées avec la nouvelle pièce à main Moveo PL.**”

Prof. Paolo Bonan, MD- Dermatologue

Florence (Italie)

Uniquement pour les utilisateurs DEKA
un accompagnement dans votre pratique médicale

DEKA Club

Les points forts d'AGAIN :

- **Technologie laser de haute puissance** vous permettant de disposer d'un large éventail de tailles de spots, de fluences et de fréquence de répétitions pour des traitements rapides et efficaces
- **Une station de travail moderne 2 en 1** permettant d'effectuer les traitements esthétiques les plus demandés sur le marché (épilation, vasculaire, pigmentaire, photo-rajeunissement)
 - Pour **tous les types de peau**
- **Rapide, sûr et indolore** avec les pièces à main Moveo
- **Changement facile de longueur d'onde** ou de traitement au cours d'une même séance
 - **Un savoir-faire à portée de main** grâce à la base de données de protocoles intégrés
 - **Faible coût de maintenance**

Technologies Moveo et
Moveo PL (en option)

Plus de
10 pièces à main standard (de 2.5 à 30 mm)

Écran LCD 10,5" orientable et inclinable à 180°
Interface ergonomique



Fibre optique renforcée

Plus de **300 protocoles intégrés**



efficacité



rapidité



sécurité



simplicité

Au cœur de l'innovation Moveo

La pièce à main Moveo pour les traitements d'épilation, offre aux utilisateurs des résultats extraordinaires à 755 nm. **Moveo réduit considérablement la quantité d'énergie réfléchie en travaillant au contact de la peau à une fluence plus faible.**

Les multiples passages sur de petites zones définies provoquent un réchauffement progressif et la destruction des poils indésirables, ayant pour résultats des séances pratiquement indolores et sans effets secondaires.

Moveo PL: Au-delà de l'épilation

La nouvelle pièce à main Moveo PL vous permet de traiter les taches cutanées en chauffant progressivement les lésions, avec une efficacité et un confort optimisés, sans provoquer de décoloration et d'hypo- ou d'hyperpigmentation de la peau.

Plus de 10 pièces à main de 2,5 à 30 mm avec reconnaissance automatique et connecteur ergonomique pour les dispositifs de refroidissement.



Données Techniques


AGAIN		
Type de laser	755 nm Alexandrite*	1064 Nd:YAG
Énergie par impulsion	64 J (max)	120 J (max)
Puissance du laser	125 W (max)	180 W (max)
Durée de l'impulsion	0.5 – 300 ms	0.4 – 300 ms
Durée totale de l'impulsion	300 ms	
Nombre d'impulsion	1	
Fréquence de répétition	De 0.5 Hz à 12 Hz	
Pièces à main (en option)	De 2.5 mm à 30 mm, Moveo, Moveo PL	
Fluence	De 5 à 600 J/cm ²	
Dimensions et poids	30(H) cm x 40(W) cm x 105(D) cm 150 Kg	
Alimentation électrique	32A @230 Vac	

* Il existe une version à une seule longueur d'onde, uniquement équipée du laser Alexandrite

ATTENTION - Rayonnement laser visible et invisible. Éviter l'exposition des yeux ou de la peau aux rayonnements directs ou diffus.
Produit laser de classe 4. Cette brochure n'est pas destinée au marché des États-Unis.

CE
0123

Résultats Cliniques

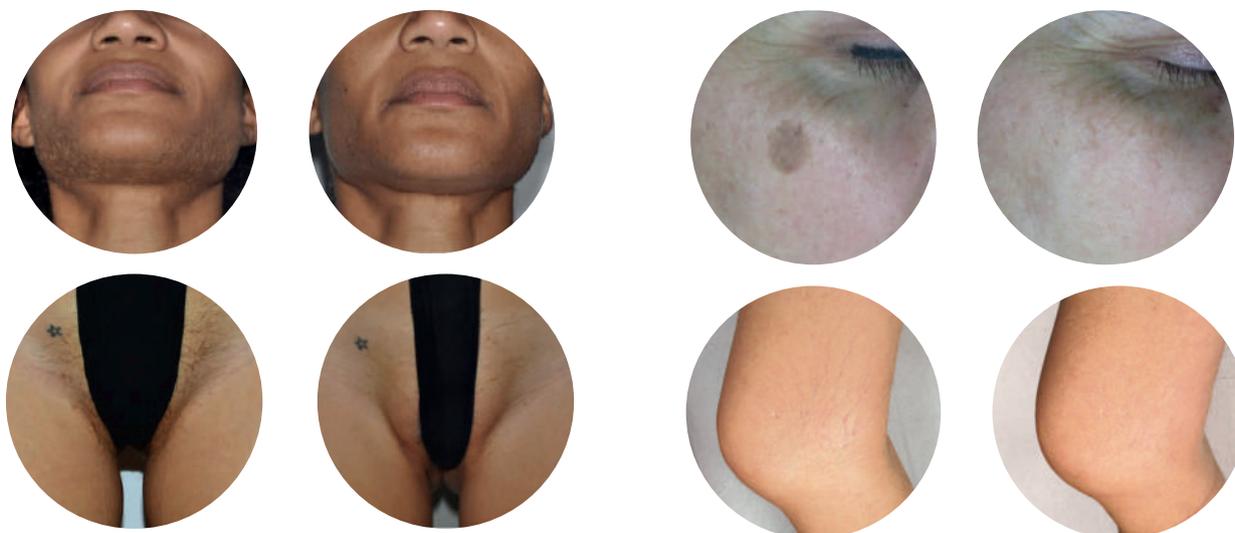

Aimable autorisation du Prof. P. Bonan, M.D. and M. Troiano, M.D

Aimable autorisation du Prof. G. Cannarozzo, M,D

DEKA
Innate Ability

Suivez-nous :



again

Tampon du vendeur

NOUVEAU :
Scannez, surfez



DEKA Filiale France

4 Rue Paul Massimi - 69007 LYON
Tel. +33 4 78 62 71 48 - Fax +33 4 78 62 66 37

DEKA Innate Ability Filiale du Groupe El.En., DEKA est un leader mondial dans la conception et fabrication de lasers et sources lumineuses pour applications dans le domaine médical. DEKA vend ses appareils dans plus de 80 pays à travers un vaste réseau de distributeurs internationaux ainsi que des bureaux directs en Italie, France, au Japon et aux USA. DEKA fabrique des dispositifs laser en conformité avec les spécifications de la Directive 93/42/CEE et son système d'assurance qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Tous droits réservés - Afin d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Document réservé aux professionnels de la santé. DEKA Laser France 4 rue Paul Massimi - 69007 Lyon - France - Tel: 04 78 62 71 48 - Fax: 04 78 62 66 37 - info@deka.fr - www.dekalaser.com S.A.R.L au capital de 155668€ - RCS Lyon- Siret 409 548 666 00042 - Code NAF 4774Z. Ne pas jeter sur la voie publique